


Brugsanvisning

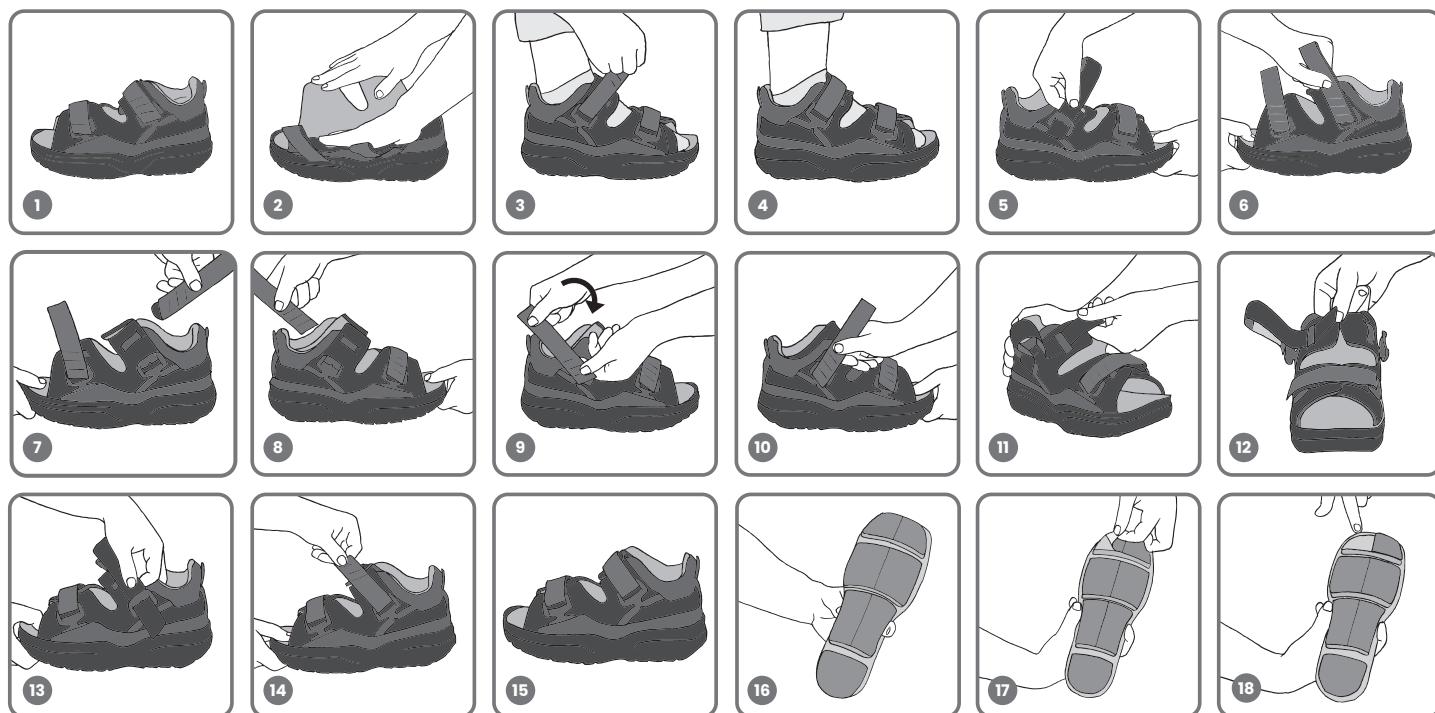

Læs venligst brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne, før du bruger CAMOposo Free.

Formål: Færdiglavede terapisko designet til at aflaste trykket på diabetiske fodsår. Du finder læsbare brugsanvisninger på vores hjemmeside.

Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Produktet er kun beregnet til brug for én patient.
- ⚠ Brug aldrig produktet på åbne sår og kun efter forudgående medicinsk vejledning.
- ⚠ Hvis der opstår overdreven smerte, følelsesløshed eller ændringer i fornemmelse, eller hvis der opleves usædvanlige reaktioner eller ubehag under brug, skal du straks kontakte din læge eller en ortopædisk tekniker.
- ⚠ Ved rødme eller bløddannelse på huden eller ved oplevelse af tryk eller friktion, kontakt straks din læge.
- ⚠ Dette medicinske produkt er udviklet til de angivne indikationer og kan blive beskadiget ved forkert eller uhensigtsmæssig brug. Aktiviteter som sport, fald eller andre ulykker samt kontakt med væsker, der ikke er kompatible med plast.
- ⚠ Rådfør dig med din behandlende læge, inden du anvender produktet i kombination med et andet medicinsk apparat.
- ⚠ Kun reserve dele godkendt af OPED GmbH må anvendes.
- ⚠ Overhold færdselsloven i dit land.
- ⚠ Ikke fremstillet med naturlig latex.
- ⚠ Kontroller funktionaliteten af VACOPaso Free under regelmæssige sårkontroller. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din læge eller din OPED-forhandler.

Anvendelse (instruktionsvideo findes på app.oped.de)

- Åbn remmen helt. Åbn skoen tilstrækkeligt for at kunne indsætte din fod. (Figur 2)
- Indsæt foden og fastgør remmen. (Figur 3)

Justering til højre fod

VACOPaso Free kan bæres på begge fødder. Skoens standardindstilling er til brug på venstre fod.

- Fjern remmen (Figur 5)
- Drej remmen 90° (Figur 6)
- Fjern remmen (Figur 7)
- Fastgør remmen på modsatte side som følger: (Figur 8)
- Indsæt remklemmen i låsen (Figur 9)
- Tryk remforseglingen ned og drej 90°, indtil den klikker. (Figur 10)
- Træk remmen gennem den første løkke (Figur 11)
- ADVARSEL: Brug ikke løkken på den modsatte side (Figur 12)
- Før remmen gennem den modsatte lås (Figur 13)
- Luk velcrofastgørelsen (Figur 14)

Tilpasning af indlægssål

- Patienten må kun foretage justeringer i samråd med den behandlende læge.
- Skum materialet under indlægssålen er opdelt i syv sektioner, der kan fjernes individuelt – dette giver mulighed for trykaflastning på de relevante dele af foden. (Figur 16)
- For at aflaste tryk på de berørte fodområder, fjern og kassér de tilsvarende sektioner af skum materialet fra sålen. (Figur 17)
- Genindsæt indlægssålen i VACOPaso Free.

Pleje / rengøring / desinfektion / sterilisering

Du modtager dette medicinske produkt i en hygiejnisk perfekt tilstand. Rengør ved aftørring med plastvenlige rengøringsmidler. Tørring: Lufttørres, må ikke tørretumbles. Desinfektion: Aftør med plastkompatibel desinfektionsmiddel. Sterilisering: Dette medicinske produkt er ikke egnet til sterilisering.

Transportforhold / opbevaringsforhold / bortskaffelse

Opbevaring: Opbevares tørt og hygiejnisk og beskyttes mod direkte sollys. Bortskaf det medicinske produkt som restaffald eller husholdningsaffald. ☂ ☀ 🗑

Produktkarakteristika

Kan bæres på højre eller venstre fod. Kan bruges som hverdagssko både indendørs og udendørs.

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
EUR	37 – 38	39 – 40	41 – 42	43 – 44	45 – 46	47 – 48
UK	4 – 5	5,5 – 6,5	7 – 8	8,5 – 9,5	10 – 11,5	12 – 13,5
US men		6,5 – 7,5	8 – 9	9,5 – 10,5	11 – 12	12,5 – 13,5
US women	6 – 7	7,5 – 8,5	9 – 10	10,5 – 11,5		
cm	24,5	26	27	28	29,5	31

Indikationer

- Sår på foden
- Diabetiske fodsår
- Postoperativ behandling efter tå- og forfodsamputationer

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Tekniske data / parametre

Materialesammensætning:
Ydersål: PU. Indlægssålsplade: PA, Remspænding: TPE, Foring: EVA-skum, Betræk: Elastan, Velcro: PA, Pudeovertræk: PU-lag, Fyldemateriale: PP-kugler, Toplag: PE-skum

Garanti

Garantien er i overensstemmelse med lovbestemmelserne. OPED GmbH's forretningsbetingelser gælder, hvor det er tilladt.

Databeskyttelse

Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger kan findes her:

<http://oped.de/support/your-data/>

Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger kan findes her:

<http://oped.ch/kontakt/your-data/>

Ved klager vedrørende produktet, såsom skader eller pasformsproblemer, kontakt producenten direkte. Kun alvorlige hændelser, der kan føre til væsentlig helbredsforringelse eller død, skal rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder i medlemslandet. Alvorlige hændelser defineres i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Dit OPED-team