

CAMP®

Humerux

humerortose med maksimal kontrol
gennem det unikke trækssystemet.

traction
system®



Humerux

humerusortose med maksimal kontrol gennem det unikke trækssystemet.

Ortosen er beregnet til behandling af Diafysære humerusfrakturer, postoperativ frakturbehandling og ved kontrol af instabilitet gennem ophelingsprocessen.



▲ **Y-trækssystem bruger en trækordning for at øge og justere spændingen**, hvilket hjælper til at maksimere kontrollen over retning, fiksering og immobilisering af humerus.



Ytraction system

▲ **Åndbart materiale som har en behagelig polstring mod huden!**

100% LATEX FREE ✓



▲ Pladerne og båndet stabiliserer humerus gennem individuel tilpasning og den cirkulære kompression omkring bløddelene.

Det kendte Sarmiento-princip giver optimal kompression omkring bløddelene. Pladerne kan formes anatomisk ved behov under opvarming*.




▲ Let justerbart brystbånd hindrer ortosen at glide ned. Polstret i armhulen for bedre komfort.

▲ Fiksering ved 3 bånd som løber gennem dobbelspænde og med lavprofil velcro, som giver en smidig, enkel, behagelig og sikker justering.

*Tag termoplastpladerne ud af ortosen, varm forsigtig med varmpistol til ca 150°C på ca 15 cm afstand.

Art.nr.	Størrelse	Længde	Omkreds
62105 0011	Small	37 cm	18 - 26 cm
62105 0012	Medium	38 cm	26 - 34 cm
62105 0013	Large	41 cm	34 - 42 cm
62105 0014	X-Large	42 cm	42 - 50 cm

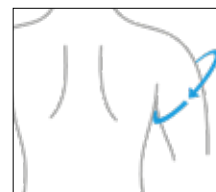

CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no