

Method TA™ AFO



METHOD TA™



Method TA™ AFO

Method TA™ AFO er en præfabrikeret, individuelt tilpasset ortose, der kan bruges til behandling af et bredt spektrum af patologiske gangafvigelser ved slagtilfælde, CP, MMC, CMT og andre komplekse neuromotoriske lidelser.

Indikationer:
CVA, CP, MS, MMC, SCI, CMT og andre neuromotoriske lidelser, der medfører gangafvigelser i ståfasen.

Kontraindikationer:
Patientvægt over 100 kg (220lbs)

*Højere vægtgrænse med inkluderet Heavy Duty stirrup

Funktioner


1. Let at tage på med tibiabånd med tommelgreb og statisk friktionsbeskyttelse for enkel enhåndsanplikation.
2. Smudsafvisende, justerbare og ompositionerbare liners for komfort hele dagen.
3. Avanceret prepreg kulfiber for fuld udnyttelse af Triple Action®-ankelledet.
4. Rigid forreste skinne med laterale komponenter og supramalleolær forlængelse til at modvirke posturale afvigelser i fod og ankel.
5. Triple Action® ankelled med individuel justering af indstilling, modstand i plantar- og dorsalfleksion samt justerbar fjederstivhed
6. Prepreg fodplade, der passer til patientens sko og giver effektiv afvikling og energiretur for en bedre gang.
7. Y-bøjle til høj belastning giver forbedret stabilitet og pålidelighed.



Justering og tuning

Method TA™ understøtter Becker's Systematic Tuning Procedure™ for Triple Action® ankler med enkle instruktioner for hurtig tilpasning og optimering.

Vores forskningsbaserede metode standardiserer og forenkler processen, hvilket giver en effektiv ortose, som klinikere kan tilpasse hurtigt uden tekniske forsinkelser, der kan forlænge patientplejen.

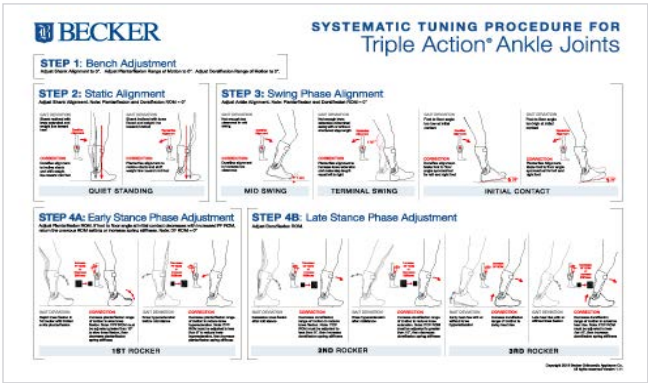

Klik eller scan QR-koden for at åbne Systematic Tuning Procedure™ PDF.



Bestilling

Art.nr.	Model	Ve/Høj	Størrelse	Max Skostørrelse	AFO Højde	Fodplade længde	Vægtgrænse
625851013	Method TA™	Venstre	Large	Herre: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625852013	Method TA™	Højre	Large	Herre: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625851011	Method TA™	Venstre	Small	Dame: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)
625852011	Method TA™	Højre	Small	Dame: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)

Brug kun som anvist. Se IFU for fuldstændig sikkerhedsinformation, indikationer, kontraindikationer og forholdsregler.



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no