

Lavtemperaturplast

Forskellige anvendelser, der fremstilles i lavtemperaturplast, stiller forskellige krav. Camp tilbyder derfor et bredt udvalg af lavtemperaturplaster, der gør det muligt at finde den rette egenskab i forhold til patientens behov.

De fleste af vores lavtemperaturplaster kommer fra Rolyan, der har mere end 30 års erfaring indenfor området. Rolyan arbejder hele tiden på at bevare og forbedre sin høje kvalitet og samtidig prioriteres forskning og udvikling af nye produkter. Samtlige plasttyper er ufarlige at bearbejde og ingen skadelige stoffer afgives ved bearbejdning.

Plasterne og de færdige ortosers egenskaber afhænger af en række forskellige faktorer.

- Hukommelse - Evne til at genvinde sin oprindelige form.
- Smidighed - Evne til at tilpasse sig til underlaget i opvarmet tilstand.
- Stretchmodstand - Evne til at give efter for stræk og tryk i opvarmet tilstand.
- Hæftevne - Evne til at hæfte til sig selv i opvarmet tilstand.
- Opvarmnings- og bearbejdningstid.


Forskellige perforeringer for lavere vægt og større ventilation.

- Peroreret 1% - Meget spredt siddende, store huller (2,5 cm mellem hullerne).
- Peroreret 2,5% - Spredt siddende, store huller (1 cm mellem hullerne).
- Optiperoreret 19% - Tætsiddende, små huller.
- Ultraperoreret 13% - Tætsiddende, meget små huller.
- Superperoreret 42% - Meget tætsiddende, små huller.



Procentdelen angiver hvor meget af materialet, der er fjernet. Ex. "Superperoreret 42%" angiver at 42% af materialet er fjernet ved perforeringen.

VI ANBEFALER MØRK OG TØR OPBEVARING.

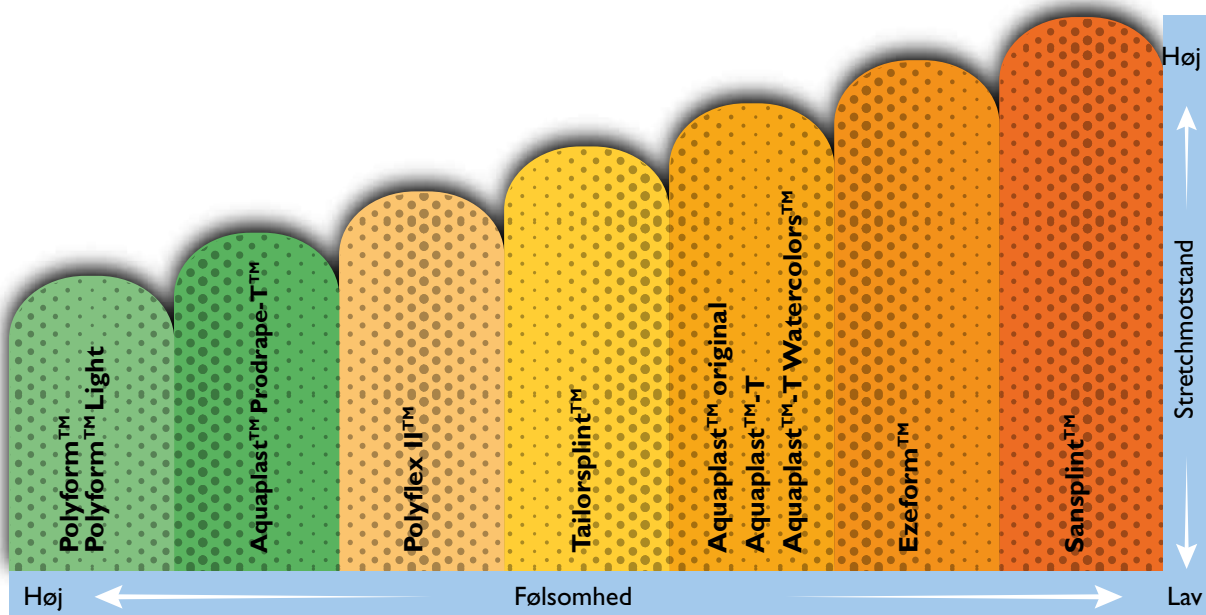

Minimalt modstand til strech

- God følsomhed
- Meget formbar
- Let at håndtere

Moderat modstand til strech

- Former sig let
- Højere kontrol

Maksimal modstand til strech

- Stabilt materiale
- Høj holdbarhed
- Rigiditet ved slutprodukt